

101mm

211mm




康樂保傷口護理產品



 **Coloplast**

101mm

211mm

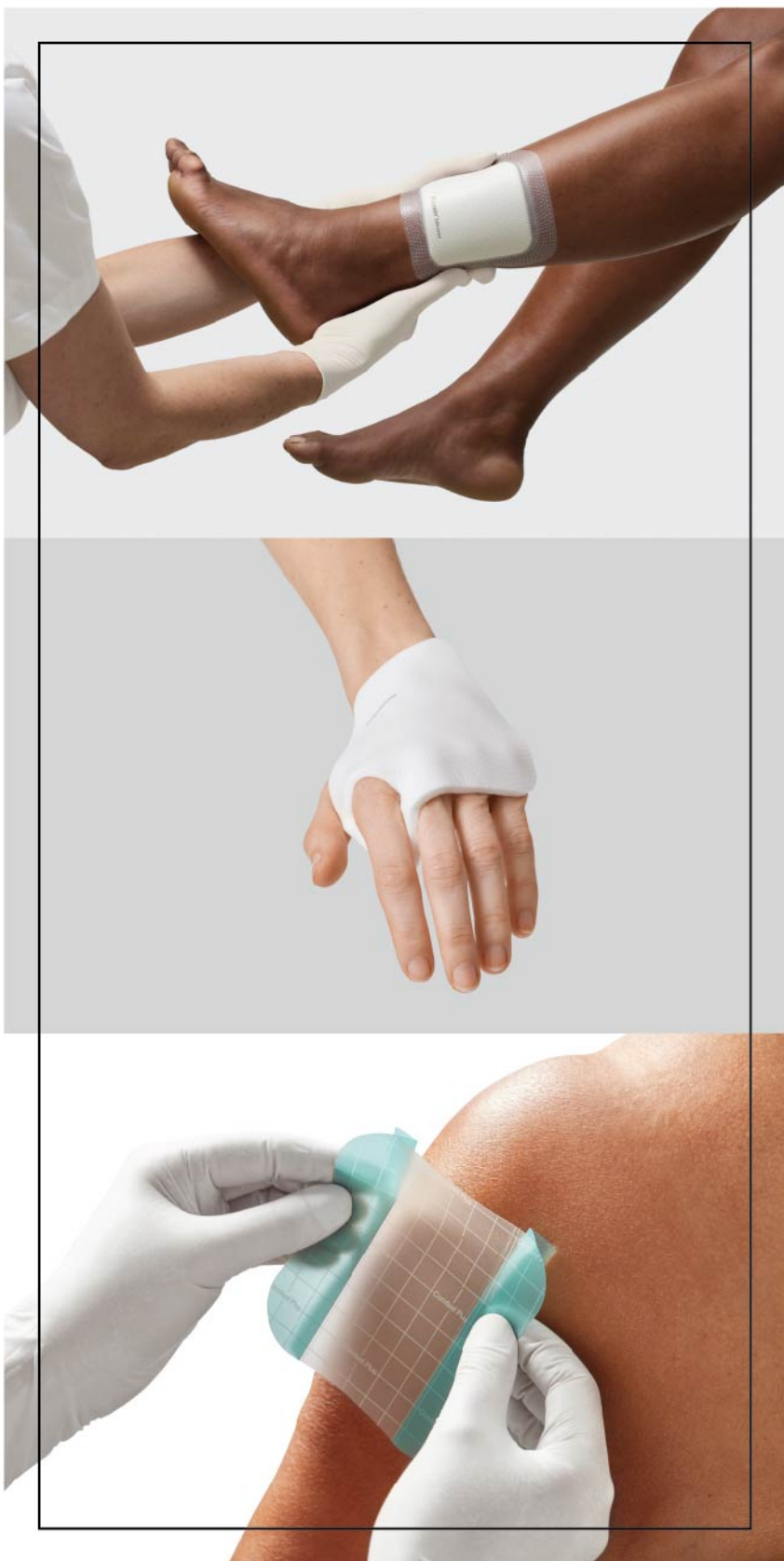

康樂保傷口護理產品	頁數
● 康樂保傷口護理系列 及其他輔助產品 Coloplast Wound and Skin Care Products	P.2-5
● 獨特 3DFit Technology 3DFit Technology	P.6
● 黏性矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Dressing	P.7
● 黏性薄型矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Lite Dressing	P.8
● 非黏性矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Non-Border Dressing	P.9
● 銀離子黏性矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Ag	P.10
● 非黏性/黏邊泡綿敷料 Biatain® Non-adhesive / Adhesive Dressing	P.11
● 非黏性銀離子泡綿敷料 Biatain® Ag Non-adhesive Dressing	P.12
● 藻膠敷料 Biatain® Alginate Soft Dressing	P.13
● 銀離子藻膠敷料 Biatain® Alginate Ag Dressing	P.14
● 親水性敷料(厚) Comfeel® Plus Dressing	P.15
● 親水性透明敷料(薄) Comfeel® Plus Transparent Dressing	P.16
● 清創凝膠 Purilon® Gel	P.17

康樂保傷口護理系列及其他輔助產品

Coloplast Wound and Skin Care Products

治療

非感染傷口



滲液程度



Biatain®
Silicone



Biatain®
Silicone
Non-Border



Biatain®
Silicone
Lite



Biatain®
Non-Adhesive

受感染或疼痛傷口



滲液程度



Biatain®
Silicone Ag



Biatain® Ag
Non-Adhesive

保護

滲液程度



Comfeel® Plus



Comfeel® Plus
Transparent

清創



Purilon®

101mm

211mm

空腔型，受破壞，較多滲液



Biatain®
Adhesive



Biatain® Alginate

空腔型，受破壞，較多滲液



Biatain® Alginate Ag

康樂保傷口護理產品指南

Coloplast Wound Care Product Guidance

傷口類型

治療目標



急性傷口



淺表傷口

濕潤傷口
癒合及
保護皮膚



有滲液而未受感染的傷口

滲液管理



有滲液而且受感染的傷口

滲液及
感染管理

建議使用產品

滲液程度



Biatain® Silicone Lite



Comfeel® Plus

Comfeel® Plus
Transparent

0-2cm 深

滲液程度



Biatain® Silicone

Biatain® Silicone
Non-BorderBiatain®
Non-Adhesive, Adhesive空腔型、潛行性
滲液較多的傷口

滲液程度



Biatain® Alginate

0-2cm 深

滲液程度



Biatain® Silicone Ag



Biatain® Ag
Non-Adhesive空腔型、潛行性
滲液較多的傷口

滲液程度



Biatain® Alginate Ag

獨特 3DFit Technology，可貼合傷口，填充間隙，並防止滲液積聚，從而達到最佳癒合條件。

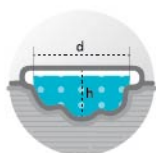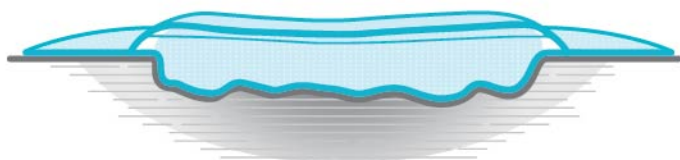

貼合傷口

填補空隙，減少滲液積聚，以實現最佳傷口癒合條件



垂直吸收

降低滲液積聚風險



鎖住滲液和 99.98% 的細菌


吸收和鎖住含細菌的滲液

黏性矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Dressing



適用於：

- 低至高程度滲液之傷口
- 急性傷口 (如術後傷口)
- 腿部潰瘍、壓瘡
- 糖尿足部潰瘍 (非感染類)

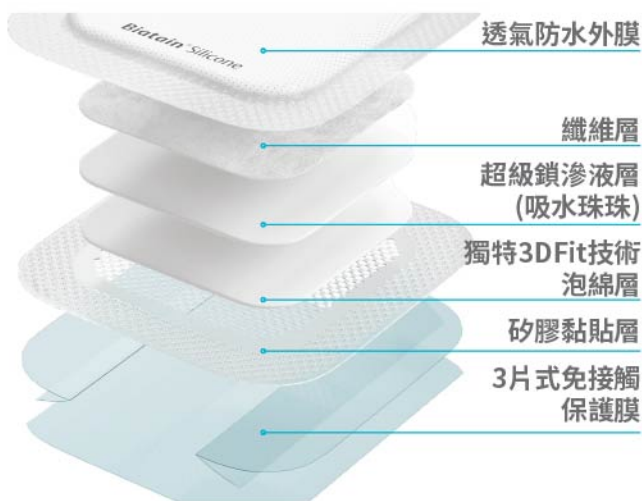

Biatain® Silicone 黏性矽膠泡綿敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
33434	7.5 x 7.5 cm	10
33436	12.5 x 12.5 cm	10
33438	17.5 x 17.5 cm	5
33400	10 x 20 cm	5
33401	10 x 30 cm	5
33404	Sacral 15 x 19 cm	5

黏性薄型矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Lite Dressing



適用於：

- 無至低程度滲液之傷口
- 急性傷口 (如術後傷口)
- 腿部潰瘍、壓瘡
- 糖尿足部潰瘍(非感染類)

Biatain® Silicone Lite 黏性薄型矽膠泡綿敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
33452	5 x 5 cm	5
33453	5 x 12.5 cm	5
33446	12.5 x 12.5 cm	10

非黏性矽膠泡綿敷料

Biatain® Silicone

Non-Border Dressing



採用 3DFit 技術的 Biatain® 矽膠非黏性泡綿敷料是一種柔軟舒適的聚氨酯泡沫敷料，具有抗菌防水的透氣表膜和溫和的穿孔矽膠粘合劑。



適用於：

- 低至高程度滲液之傷口
- 急性傷口 (如術後傷口)
- 腿部潰瘍、壓瘡
- 糖尿病足部潰瘍 (非感染類)

Biatain® Silicone Non-Border Dressing 非黏性矽膠泡綿敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
39022	10 x 10 cm	10
39025	15 x 15 cm	5

銀離子黏性矽膠泡綿敷料 Biatain® Silicone Ag



Biatain®銀離子黏性矽膠泡綿敷料由以下三層物料組成：

- 抗菌、防水、可透氣的頂層薄膜
- 含銀的吸水聚氨酯酯泡綿
- 有孔的黏性矽膠



適用於：

- 低至中程度滲液之傷口
- 急性傷口(如術後傷口)
- 二級燒傷
- 糖尿足部潰瘍(非感染類)



銀離子矽膠泡綿敷料可有效抑制
99.99%的已知影響傷口癒合的細菌菌株，
預防生物膜形成

Biatain® Silicone Ag 銀離子黏性矽膠泡綿敷料




型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
39636	7.5 x 7.5 cm	5
39638	12.5 x 12.5 cm	5

非黏性泡綿敷料

Biatain® Non-adhesive Dressing

黏邊泡綿敷料

Biatain® Adhesive Dressing

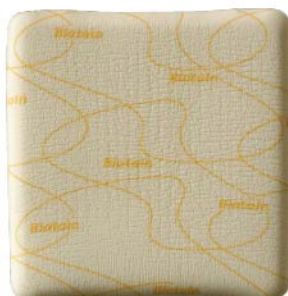

適用於：

- 急性傷口 (如術後傷口)
- 腿部潰瘍、壓瘡
- 糖尿足部潰瘍 (非感染類)
- 供皮部位
- 二級燒傷

Biatain® 泡綿敷料系列可保持傷口癒合時適合的最佳濕度。材質構造柔軟，能緩衝外界壓力，提供傷口舒適感；其半透氣薄膜表層能防水、防菌，有效保護傷口癒合過程。

Biatain® Non-Adhesive 非黏性泡綿敷料，適合有高滲液或傷口周邊皮膚有損傷的傷口。全新斜邊設計，能避免傷口周邊的皮膚因壓力做成印記的情況，增加使用時的舒適度。

Biatain® Non-Adhesive 非黏性泡綿敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
3410	10 x 10 cm	10
3413	15 x 15 cm	5

Biatain® Adhesive 黏邊泡綿敷料，使用水膠體黏合劑，可有效吸收和鎖住傷口滲液，適合傷口周邊皮膚完整無損的傷口使用。

Biatain® Adhesive 黏邊泡綿敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
3462	7.5 x 7.5 cm	10
3421	15 x 15 cm	5
3423	18 x 18 cm	5

非黏性銀離子泡綿敷料



Biatain® Ag Non-adhesive Dressing



適用於：

- 有感染風險的傷口
- 急性傷口 (如術後傷口)
- 供皮部位
- 二級燒傷
- 腿部潰瘍、壓瘡
- 糖尿足部潰瘍 (非感染類)

Biatain® Ag銀離子泡綿敷料，其作用和Biatain®泡綿敷料一樣，加上含有對抗細菌的活性銀離子成分，尤其適用於受感染的傷口，能持續釋放銀離子長達7天，有效抑制已知影響傷口癒合的細菌菌株，預防生物膜形成。

全新斜邊設計，增加使用時的舒適感及能避免在傷口周圍的皮膚因壓力做成印記的情況。



Biatain® Ag Non-Adhesive 非黏性銀離子泡綿敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
9622	10 x 10 cm	5
9625	15 x 15 cm	5

藻膠敷料


Biatain® Alginate Soft Dressing



適用於：

- 腿部潰瘍
- 糖尿病引致的足部潰瘍
- 壓瘡
- 二級燒傷
- 空腔型傷口

Biatain® Alginate藻膠敷料擁有強大吸收滲液的能力，能吸收多達其重量的18倍，適用於中度到高度滲液之傷口。

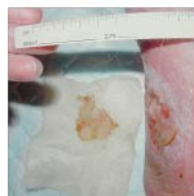

敷料吸收滲液後會形成親水性凝膠覆蓋於傷口上，有助於自體清創，同時保持最適合於傷口癒合的潤濕環境。藻膠亦可幫忙控制淺層傷口的輕微出血。



- 供非細菌感染傷口使用

Biatain® Alginate 藻膠敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
3710	10 x 10 cm	10

銀離子藻膠敷料


Biatain® Alginate Ag Dressing



適用於：

- 腿部潰瘍
- 糖尿足部潰瘍
- 壓瘡
- 二級燒傷
- 空腔型傷口

Biatain® Alginate Ag銀離子藻膠敷料含有活性銀離子，除了擁有Alginate藻膠敷料的強效吸收滲液的能力外，同時能持續釋放銀離子高達4-7天，具有有效的抗菌特性，可防止微生物侵入傷口，適用於中度到高度滲液之傷口。

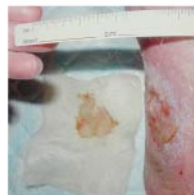

- 供受感染傷口使用

Biatain® Alginate Ag 銀離子藻膠敷料



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
3760	10 x 10 cm	10
3780(塞條)	3 x 44 cm	10

親水性敷料(厚) Comfeel® Plus Dressing



適用於：

- 腿部潰瘍
- 壓瘡
- 淺層燙傷、表淺部份深度燙傷
- 供皮部位
- 手術後傷口
- 表皮擦傷

Comfeel® Plus親水性敷料(厚)是一種含有海藻酸鈣的半透明水膠體敷料，能提供濕潤的環境供傷口癒合。



透明剪裁配合網格顯示方便量度及觀察傷口情況。



Comfeel® Plus Dressing 親水性敷料(厚)



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
33110	10 x 10 cm	10
33115	15 x 15 cm	5
33120	20 x 20 cm	5
33146	4 x 6 cm	30

親水性透明敷料(薄) Comfeel® Plus Transparent



適用於：

- 腿部潰瘍
- 壓瘡
- 淺層燙傷、表淺部份深度燙傷
- 供皮部位
- 手術後傷口
- 表皮擦傷

Comfeel® Plus透明親水性敷料(薄)比Comfeel® Plus親水性敷料(厚)更薄、更透明及更柔軟，適用於無至低滲液傷口。



此外，它質料較薄，彈性力強，能配合任何身體弧度，透過透明透氣的抗菌薄膜，可觀察傷口情況。



透明剪裁配合網格顯示方便量度及觀察傷口情況。

Comfeel® Plus Transparent 親水性透明敷料(薄)



型號	規格(cm x cm)	包裝(塊/盒)
33530	5 x 7 cm	10
33533	10 x 10 cm	10
33536	9 x 14 cm	10
33539	15 x 15 cm	5
33542	15 x 20 cm	5
33545	20 x 20 cm	5
33548	5 x 25 cm	5

清創凝膠 Purilon® Gel



適用於腐爛和壞死傷口，例如：

- 腿部潰瘍
- 壓瘡
- 非感染性糖尿病足部潰瘍
- 第一級和第二級燒傷

Purilon® Gel 清創凝膠主要作用為清除腐肉及壞死組織。含90%淨化水和10% CMC，為傷口提供足夠的水份，有效軟化及清創壞死組織。凝膠能固定於腐肉或壞死組織上，不會溜走，避免傷口周邊皮膚因浸潤而引致受損。



Purilon® Gel 清創凝膠



型號	規格(g)	包裝(支/盒)
3900	15	1

康樂保(Coloplast)研發的相關產品及服務，是以讓有需要的人得到貼心護理，活得更輕鬆為目的。透過與客戶緊密聯繫及合作，我們提供最能貼合客戶特殊需要的解決方案。我們稱這服務為「貼心護理」。

我們的產品包括造口護理、泌尿及失禁護理，和傷口及皮膚護理系列。我們的分公司遍佈全世界，員工總數超過14,500人。

**Coloplast****康樂保(香港)有限公司**

九龍長沙灣長裕街8號億京廣場12樓1202室

熱線電話：(852) 3628 7488

WhatsApp 諮詢服務：(852) 6291 7291

傳真：(852) 2302 1884

電郵：hkcare@coloplast.com

www.coloplast.com.hkThe Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. © 2025-02